


EcoNano™

智能面部護理儀 使用說明



www.econanoshop.com

快速指南

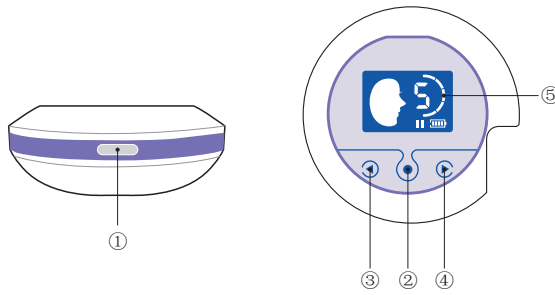

- 按電源按鈕啟動儀器，暫停或關掉儀器
- 主按鈕，輸入設定模式
- < 代表減慢
- > 代表增速
- 顯示當前模式和強度

使用減慢/增速按鈕開始使用儀器。

注意事項

使用儀器前需清潔並擦乾臉部。
在使用儀器前，請除下所有金屬飾物，如耳環和髮夾。
切勿將儀器用於發炎或受傷的皮膚上。

對於具有以下任何症狀的用戶，請在使用儀器前諮詢您的醫生或其他合資格的醫護人員：

- 急性疾病
- 惡性腫瘤
- 目前正在接受強心劑或其他醫療電子設備的治療
- 孕婦和幼兒
- 高血壓

如果您在使用儀器過程中遇到任何異常症狀或不適，請立即停止使用。

環境狀況

- 避免在潮濕環境中使用此儀器。
- 避免在沒有空氣流通的封閉環境中使用。

安全方面


- 如果儀器出現故障，請不要自行拆卸儀器。
- 請聯絡您的零售店或當地銷售代表以尋求協助。
- 將儀器存放在安全的位置。

- 使用後請清潔儀器以保持良好的狀況。

使用前的準備工作

- 確保儀器有足夠的電量。
- 在舒適的環境中使用此儀器。
- 不要將電極墊放在心臟，頸部或以上位置。
- 確保粘貼墊是乾淨的。
- 確保電極墊均勻地粘貼在面上。
- 確保電極墊和主機是恰當地連接上。

組件

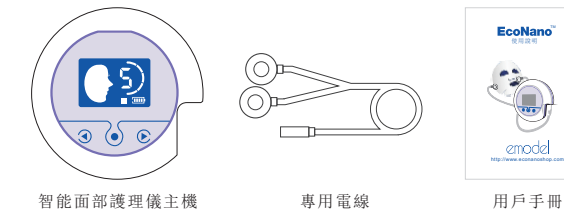

智能面部護理儀主機

專用電線

用戶手冊



智能面部護理儀面膜（獨立包裝）

保用登記

製造商：廣州琦妮化妝品有限公司
地址：中國廣東省廣州市白雲區嘉禾街長紅村第三經濟合作社十五畝工業區C, D棟二樓。

分銷商：依高納米有限公司
地址：香港新界荃灣榮華角街66-82號金熊工業中心8樓H室。
電話：852-2127-4950
傳真：852-2127-4951


根據用戶手冊，自購買日起1年保用。此保用不包括以下情況引起的損壞：
• 使用不當，未經授權的拆卸/改裝或存放在不合適的環境下。
• 未經登記的儀器；或沒有購買的單據。
• 消耗組件的毀壞（例如電池洩漏）或自然損壞。

EcoNano™ 保用登記卡
智能面部護理儀
(配合EcoNano 石墨烯面膜)

購買日期 _____ 產品保用卡號 _____
注意：保用期由購買日起一年內，需保留購買的單據。
客戶資料：
姓名 _____
聯繫號碼 _____ 郵編 _____
地址 _____
經銷商資訊：
商店名稱 _____
銷售員姓名 _____
發票號碼 _____ 郵編 _____
地址 _____



此卡由顧客個人保管，不可轉讓！

組件名稱和功能

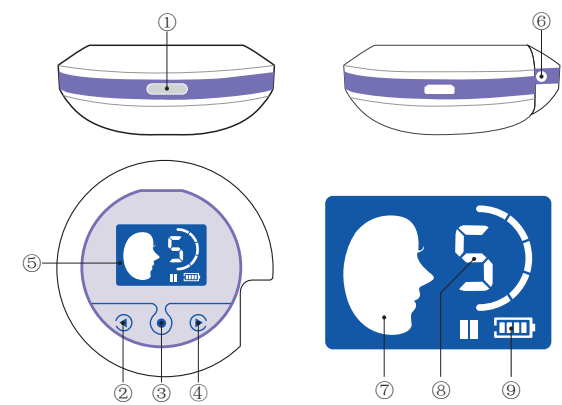

- 電源按鈕、開始/暫停按鈕
- 減慢按鈕
- 設定按鈕
- 增速按鈕
- LCD顯示窗口
- 連接
- 狀況
- 當前的力度
- 剩餘電量

功能及產品連接

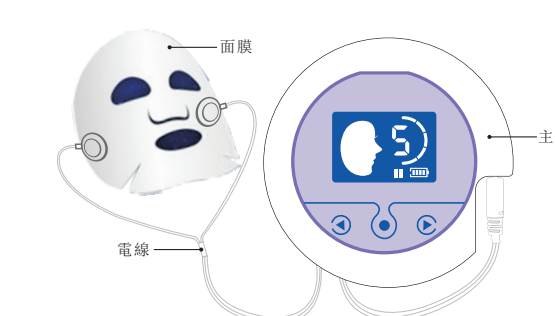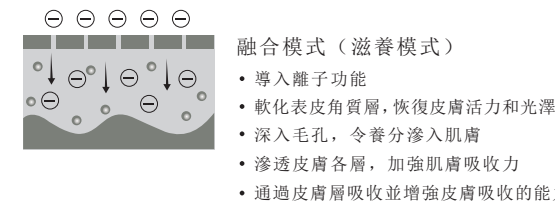

將電線，面膜的夾子和電極墊連接到主機。

使用方法



- 首先，清潔臉部。
- 打開智能面部護理儀面膜，然後將其均勻地敷上，緊貼在整個臉部。
- 確保夾子黑色的那面種敷在臉上。
- 再調整眼睛和鼻子的部分，以確保面膜均勻地敷在臉上。
- 將智能面部護理儀連接到面膜。
- 將電線連接到面膜夾，電極墊和主機。避免電線靠近心臟位置。
- 選擇所需的力度，然後按開始按鈕。
- 使用後，將電線與夾子拆開，從面膜上取下。
- 輕輕按摩肌膚，使肌膚吸收餘下精華液。

如果有皮膚敏感，請在開始前調較合適的強度和頻率。

操作

基本操作

- 開機 (Power On)：請按電源按鈕。
- 關機 (Power Off)：請長按電源按鈕約3秒鐘。
- 暫停 (Pause On)：請按“暫停”按鈕。
- 開始 (Play)：請按開始按鈕。

調整強度

- 按模式按鈕進入強度調整屏幕
- 按增加和減少按鈕可調整至適合您的程度
- 輸入程度範圍由1至5級（1是最輕；5是最強）
- 隨時按增加或減少按鈕以調整所需之程度
- 留意：強度越大並非最佳。
- 在可接受的情況下逐漸增加強度或按個人情況選用最適合自己的程度。長期使用，效果更為顯著。
- 每一次按鈕開機自動設定時限為15分鐘，完成後，如果需要繼續使用可以按按鈕。

當電量不足時，請使用USB電線充電。

1. 使用後，儀器將在2分鐘後自動關機。
2. 按着按鈕時，會發出嗶嗶聲。
3. 設置合適的強度等級後，儀器將自動啟動。
4. 您可以在暫停期間或儀器操作之前調整強度級別。
5. 請根據個人需要設定適當的強度和持續時間。

操作異常

- 若儀器出現故障，請參閱以下列表的解決方法。如果不能解決問題，請致電客戶服務中心020-86349449，我們將盡快提供協助。

徵兆	解決方法
無法開機	檢查USB電線是否正確地連接上電源主機。
在LCD上顯示電線連接錯誤的圖標閃爍	檢查電離子導入器和電線是否正確地連接上。如果圖標繼續閃爍，請拔出電線並重新連接。若閃爍繼續，擦試電極墊以避免其他物質影響接觸。

如有其他故障情況，請聯繫客戶服務中心。

產品規格

產品名稱	eModel (HE-100)
產品類別	離子導入器
目的	向皮膚施加微電流，將營養成分注入皮膚
主功能	離子注入模式（提供營養模式）
頻率	110Hz
操作時間	每次使用15分鐘
建議使用時間	每天最多30分鐘
可調節的強度	5個程度
尺寸	75毫米（寬）x 75毫米（長）x 25毫米（高）
重量	54克（不包括電池）
電源	USB轉接/充電線連接電源
電子安全類別	內部供電設備/BF型應用組件